

Invacare® | **XPO₂**



Oavsett var du är finns syret där

Invacare's **XPO₂** – är en bärbar syrgaskoncentrator, idealisk för aktiva personer som är beroende av syre. De har nu möjligheten att välja när, var och hur de ska resa. Kliniskt ändamålsenligt syre levereras i **Sensi-Pulse** doser i tillräcklig mängd även för den mest syrekrävande brukaren. **XPO₂** kommer i en stilren design och har ett enkelt användargränssnitt, där allt satts ihop till ett nätt, stadigt, lättviktspaket.



Yes, you can.®



Bärbar frihet för maximalt oberoende

Liten och nätt uppmuntrar Invacare XPO₂ gående brukare att göra sin livsstil så fri och oberoende som möjligt. Med en vikt på 2.9 kg har XPO₂ ändrat klassificeringen av "bärbara" koncentratorer. Möjligheten att ladda och sköta XPO₂ från en vanlig kontakt eller fordonsuttag ger ett oberoende som ofta saknas med äldre mer traditionella former av portabelt syre.

En partner på resan

XPO₂ från Invacare är den perfekta partnern för att minska kostnaderna för bärbart syre, och samtidigt bibehålla den högsta av servicenivåer. Sann bärbarhet och hög klinisk effektivitet, tillsammans med det enkelt användargränssnitt ger patienter förtroende och frihet att resa.

Klinisk ändamålsenlig syrelevererans

Den beprövade och patenterade Sensi Pulse har designats för att likna volymen som levereras vid konstant flöde och för att ge bästa syremättnad till brukaren. Bespararen tillför syre tidigt i brukarens respiratoriska cykel för att säkerställa maximal effektivitet och komfort.

Med en produktion av 900ml syre, hög syrekonzentration, hög trigger-känslighet, snabb respons och ett lätt övertryck kan man vara säker på att XPO₂ håller brukaren syresatt. XPO₂ producerar terapeutiskt syre ända upp till 35 andetag/minut vid alla inställningar.

Tillbehör



Bärväska
1522884-XPO150



Extern batteri
1522884-XPO112



Adapter AC/DC, Europa
1522884-XPO132



Lätt och robust vagn

Tillbehör och Egenskaper



Fullständig patient lösning

Med XPO₂ och Perfecto₂ ges patienten en heltäckande syrgaslösning.



Prestanda

Förbli syresatt av XPO₂ effektiva pulserande syresättning.



Faktiskt bärbar

Med en vikt på endast 2.9kg.



Nätt & lätt

Nätt och diskret design uppmuntrar till aktivitet, resor och självständighet



Kliniskt effektiv

Levererar syre under den initiala fasen av inandningen för ett effektivt gasutbyte.



Lätt att hantera

Kontrollpanelen är enkel att förstå och hantera.




Filter och Drifftidsmätare

Enkelt att rengöra filter samt drifftidsmätare.



Ökat oberoende



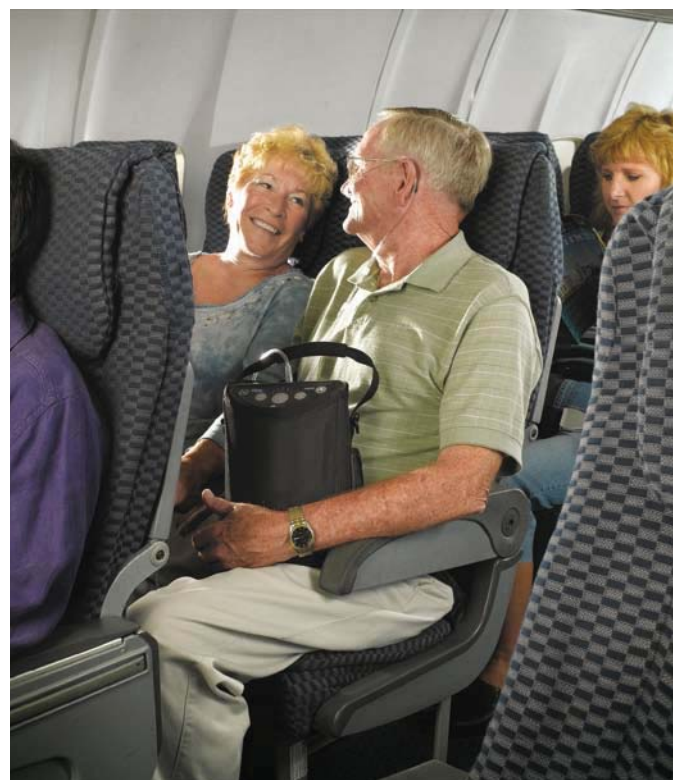




Fördubbla självständigheten i upp till 7 timmar med ett kompletterande batteri.








FAA Godkänd

Godkänd att använda ombord på flygplan.

Tekniska data

XPO ₂	 254 mm	 178 mm	 102 mm	 2.9 kg koncentrator, 0.7 kg extra batteri	 100-240 VAC 50/60 Hz	 12-16 VDC	 FAA Godkänd
------------------	--	--	--	--	--	---	---

XPO ₂	 Puls dos Läge 1-5 900ml/min	 87% - 96%	 IPX2 – skyddad mot droppande vatten vid lutning upp till 15°	 60 W	 ≤ 45 dB(A) at setting 2
------------------	---	---	--	--	---

Sensi-Pulse

Sensi-Pulse:

Sensi-Pulse-tekniken ger konstant syrevolym/minut för att efterlikna naturliga andetag. Det innebär att oavsett inställning och andningsfrekvens hos brukaren levereras samma mängd syre. När andningsfrekvensen sjunker ökar dosen syre som levereras. Den mycket känsliga Sensi-Pulse gör att brukaren inte behöver anstränga sig mer än -0,20 cm H₂O för att aktivera Sensi-Pulse. Därefter levereras en stor volym i början av varje andetag för att garantera maximalt välbefinnande för brukaren och klinisk effektivitet.

Position	1	2	3	4	5
Genomsnittlig puls volym vid 20 andetag/min	15 ml	23 ml	31 ml	37 ml	42 ml
Genomsnittlig puls volym vid 30 andetag/min	10 ml	15 ml	21 ml	25 ml	28 ml
Batteritid (h)	3.5	2.5	2	1.5	1
Batteritid (h) inkl extra batteri	7	5	4	3	2

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga - Sverige
Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

© 2012 Invacare International Sàrl.
Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

XPO2 - SE - 02/2012



Yes, you can.®

Lokal representant:



Aiolos Medical AB
Nattvindsgatan 9
652 21 Karlstad
Tel 054-53 48 05 - Fax 054-53 47 87
air@aiolos.se - www.aiolos.se